


RX5 - T

Berührungsloser Seifen- und Desinfektionsmittelspender
Touchless dispenser for soap and disinfectants

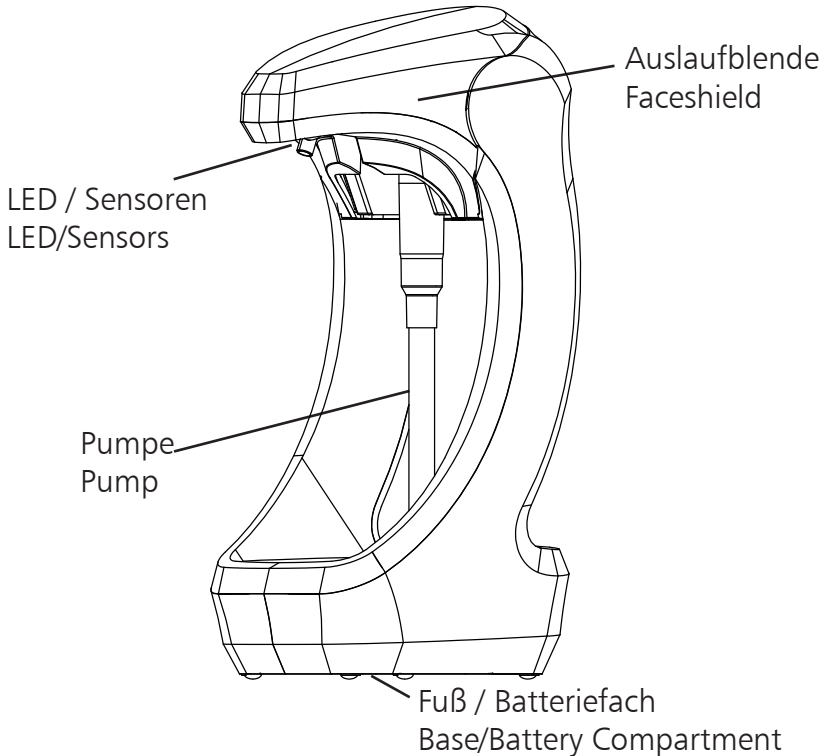

! Wichtig!!

Vor der Verwendung neuer Füllgüter ist stets die Kompatibilität von Füllgut und Spendersystem zu prüfen, um eine einwandfreie Funktionalität gewährleisten zu können. OPHARDT hygiene übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden oder Kosten, die durch Inkompatibilitäten von Füllgut und Spendersystemen entstehen können.

The compatibility of filling material and dispenser system must be checked prior to the use of new filling materials, in order to be able to guarantee fault-free functionality. OPHARDT hygiene assumes no liability for any damages or costs which arise due to the incompatibility of filling material and dispenser systems.

D Bedienungsanleitung

EN Instruction manual

1.	Hinweise zur Benutzung der Anleitung.....	3
2.	Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	3
3.	Sicherheitshinweise.....	4
4.	Technische Zeichnung.....	5
5.	Lieferumfang.....	5
6.	Spendermontage.....	6
7.	Inbetriebnahme.....	8
8.	Bedienung.....	10
9.	Dosierung einstellen.....	11
10.	LED-Signale.....	11
11.	Instandhaltung / Pflege und Wartung.....	12
12.	Risiken und Störungen beheben.....	13
13.	Garantie.....	14
14.	Entsorgung.....	14
15.	Technische Daten.....	15

1.	Indications for the use of the service instructions ..	16
2.	Intended use.....	16
3.	Safety information.....	17
4.	Technical drawing.....	18
5.	Scope of delivery.....	18
6.	Mounting of the dispenser.....	19
7.	Going into operation.....	21
8.	Basic operation.....	23
9.	Changing stroke.....	24
10.	LED Function.....	24
11.	Maintenance / attendance and maintenance.....	25
12.	Eliminate trouble.....	26
13.	Warranty.....	27
14.	Disposal.....	27
15.	Technical data.....	28

D 1. Hinweise zur Benutzung der Anleitung / 2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

1. Hinweise zur Benutzung der Anleitung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet:



Sicherheitshinweis

Ein Nichtbeachten der Anweisungen kann Personenschäden zur Folge haben.

HINWEIS

Ein Nichtbeachten der Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch





Dieses System ist für Handdesinfektionsmittel und -seifen geeignet.

Es ist **nicht** für den Einsatz mit hochviskosen, abrasiven oder aggressiven Produkten vorgesehen.

Der Spender kann sowohl freistehend verwendet als auch an einer Wand oder auf einem Standfuß angebracht werden. Das Gerät nur in Innenräumen verwenden.

Das Gerät ist für die Handdesinfektion und -reinigung unter normalen Nutzungsbedingungen vorgesehen.

Umgebungsbedingungen:

-  • Verwenden Sie das Gerät nie in explosionsgefährdeten Bereichen.
-  • Verwenden Sie das Gerät nur in einer staubarmen Umgebung.
-  • Achten Sie darauf, dass das Gerät nur bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von <90% (nicht kondensierend) benutzt wird.
-  • Verwenden Sie das Gerät nur bei Raumtemperatur 15 - 30 °C

D 3. Sicherheitshinweise

3. Sicherheitshinweise



Achtung!

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme aufmerksam durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf.

OPHARDT hygiene schließt in den folgenden Fällen jegliche Haftung aus:

- Schäden am Gerät durch mechanische Einflüsse
- Veränderungen am Gerät ohne ausdrückliche Genehmigung von **OPHARDT hygiene**
- Verwendung für andere als in der Anwendung beschriebenen Zwecke

3.1 Allgemeine Sicherheit


- ⚠ • Reparaturen am Gerät dürfen nur von **OPHARDT hygiene**-Mitarbeitern oder durch **OPHARDT hygiene** autorisierte Personen durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren entstehen. Wenden Sie sich im Reparaturfall an den Hersteller.
- ⚠ • Hängen Sie das Gerät an einem trockenen und gegen Spritzwasser geschützten Platz auf.
- ⚠ • Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Achten Sie auf die Aufbewahrung und Nutzung außerhalb der Reichweite von Kindern.
Montieren Sie das Gerät nur an Stellen, an denen es von Kindern nicht erreicht werden kann.
- ⚠ • Personen mit eingeschränkten motorischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten sowie Kinder müssen bei der Nutzung des Gerätes beaufsichtigt werden.
- ⚠ • Das Gerät ist nicht geeignet zum Transport von Medien.
- ⚠ • Bringen Sie das Gerät nicht direkt in Durchgangsbereichen an.
- ⚠ • Das Gerät ist nicht für die Dosierung von anderen als den angegebenen Medien geeignet.
- ⚠ • Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit auslaufsicheren Alkaline-Batterien des selben Herstellers und Typs sowie mit gleichen Ladezustand.
Nutzen Sie ausschließlich Batterien mit Größenangabe vom Typ C.
- ⚠ • Verwenden Sie das Gerät nicht mit wiederaufladbaren Batterien (Akkus).
- ⚠ • Verwenden Sie den Spender nicht weiter, wenn die Batterien im Gerät ausgelaufen sind.
- ⚠ • Wenden Sie niemals rohe Gewalt an.
- ⚠ • Entnehmen Sie die Batterien vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten aus dem Gerät.
- ⚠ • Zerlegen Sie das Gerät nicht. Es enthält keine reparierbaren Teile.
- ⚠ • Die Auslaufblende lässt sich nicht entfernen.
- ⚠ • Die Batterieklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- ⚠ • Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern erledigt werden.

D 3. Sicherheitshinweise / 4. Technische Zeichnung / 5. Lieferumfang

3.2 Sicherheit beim Betrieb des Gerätes

- ⚠ • Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit.
- ⚠ • Halten Sie das Gerät von Wärmestrahlung und Hitzeeinwirkung fern.
- ⚠ • Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser.
- ⚠ • Befüllen Sie das Gerät gemäß seiner bestimmungsgemäßen Verwendung nur mit den angegebenen Produkten.
- ⚠ • Das Gerät hat keine abnehmbaren Teile mit Ausnahme der Pumpe, des Behälters, der Batterieabdeckung und der Batterien.
- ⚠ • Das Gerät ist nicht autoklavierbar und kann nicht in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden.
- ⚠ • Das Gerät darf nicht mit einem Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger gereinigt werden.
- ⚠ • Stellen Sie sicher, dass das verwendete Medium nicht auf den Boden gelangt.

4. Technische Zeichnung

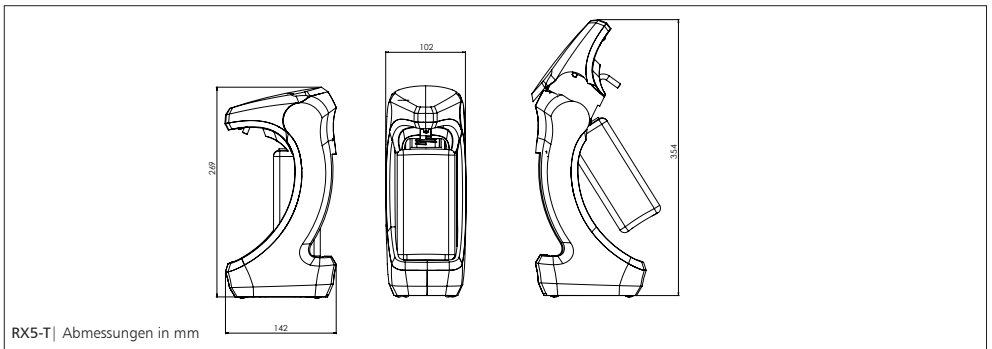

5. Lieferumfang

- Spender
- Kunststoff-Pumpe
- Behälter, 500 ml
- Batterien (4 Monozellen, Typ LR 14)
- Bedienungsanleitung
- optional: Wandhalterung (inklusive ingo-man® Standard-Wandplatte und Befestigungsset)

D 6. Spendermontage



6. Spendermontage

6.1 Wandmontage

Der Spender kann freistehend verwendet oder an einer Wand montiert werden.

Wenn Sie ihn freistehend verwenden, stellen Sie sicher, dass:

- die Standfläche eben und stabil ist
- keine beweglichen Gegenstände in der Nähe sind
- falls der Spender umfällt, eventuell auslaufendes Medium nicht mit anderen Gegenständen in Berührung kommt.

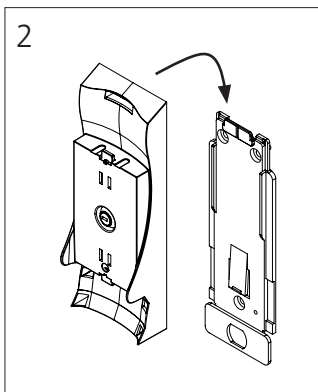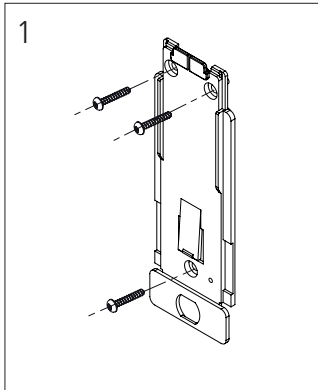

Wenn der Spender an einer Wand montiert werden soll, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen:



HINWEIS

- Der Spender muss mit mindestens 3 Schrauben mithilfe der mitgelieferten Halterung an einer geraden Wand angebracht werden.
- Nutzen Sie für die Wandmontage die mitgelieferten oder andere geeignete Befestigungsmaterialien.
- Stellen Sie vor der Montage die Eignung der Wand sicher!
- Berücksichtigen Sie bei der Wahl des Standortes, dass das Gerät gut zugänglich ist, um die Befüllung zu erleichtern!
- Montieren Sie das Gerät nicht in engen Eingangsbereichen und Durchgängen!
- Mikrowellen oder Leuchtstoffröhren können elektromagnetische Störungen hervorrufen. Wenn elektromagnetische Störungen auftreten, müssen Sie den Verursacher entfernen. Anschließend sollte das Gerät wieder einwandfrei funktionieren.

Befestigen Sie die ingo-man® Wandplatte mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln an der Wand (Abb. 1).


Drücken Sie den Wandhalter an die Wand und schieben Sie ihn auf die ingo-man® Wandplatte, bis die Federzunge einrastet (Abb. 2).

D 6. Spendermontage

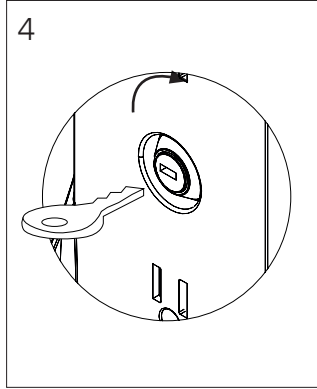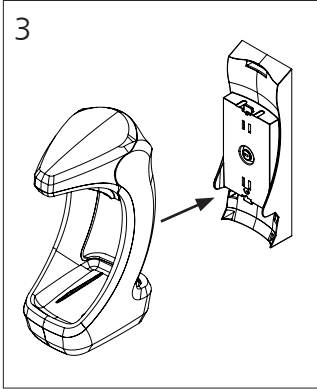



Montieren Sie den Spender am Wandhalter, indem Sie die Öffnung am Behälter über die rechteckige Aufnahme des Wandhalters schieben (Abb. 3).

Drehen Sie den Schlüssel, um den Spender zu verriegeln. Entfernen Sie den Schlüssel, bevor Sie den Behälter installieren (Abb. 4).

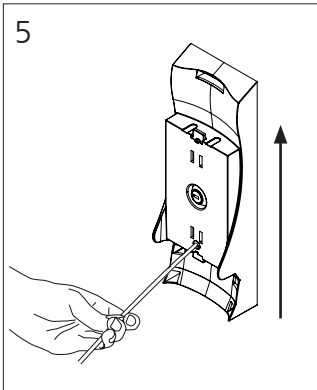

Um den Wandhalter von der ingo-man® Wandplatte zu entfernen, führen Sie ein spitzes Werkzeug in die vorgesehene Bohrung und drücken Sie die Federzunge der Wandplatte nach hinten. Der Wandhalter kann nun nach oben herausgeschoben werden (Abb. 5).

D 7. Inbetriebnahme

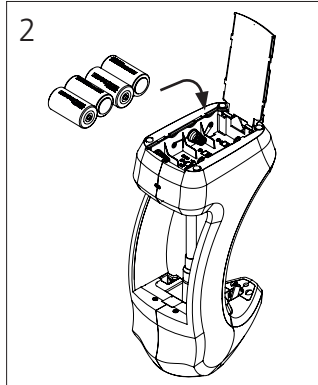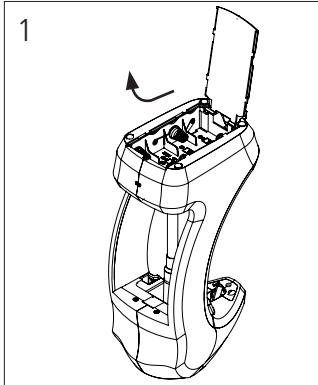

7. Inbetriebnahme

7.1 Einsetzen der Batterien


Um das Batteriefach zu öffnen, schieben Sie die Abdeckung in Richtung der Rückseite des Spenders. Anschließend können Sie die Abdeckung nach oben schwenken, um das Batteriefach zu öffnen (Abb. 1).

Legen Sie die Batterien gemäß den Markierungen im Batteriefach ein (Abb. 2). Achten Sie auf richtige Polarität.

Platzieren Sie das Band unter den Batterien, bevor Sie diese einlegen.

HINWEIS

Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird, sollten Sie die Batterien entfernen.

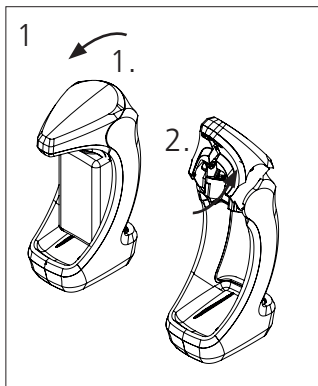



7.2 Pumpe und Behälter montieren

Um die Auslaufblende zu öffnen, ziehen Sie sie zunächst nach vorn (1.) und schwenken sie anschließend nach oben in Richtung der Rückseite des Spenders (2.) (Abb. 1).



HINWEIS

Entfernen Sie vor dem Transport das Füllmedium.

D 7. Inbetriebnahme

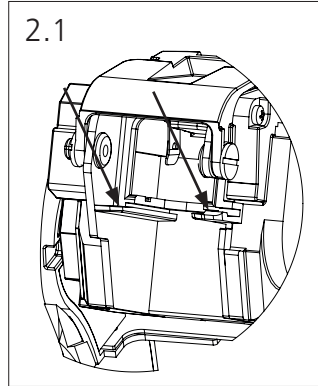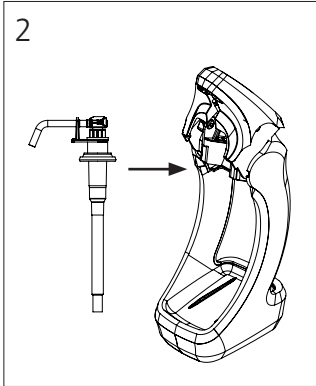

Schieben Sie die Pumpe in die Führungen des Gehäuses und rasten Sie die Sicherungslasche so wie in der Abbildung gezeigt ein (Abb. 2 und Abb. 2.1).

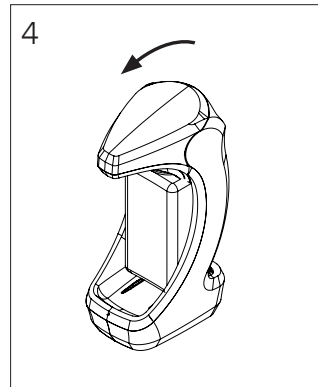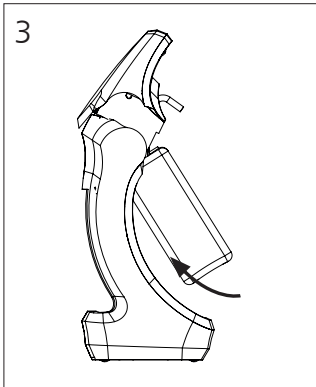




Halten Sie den Behälter leicht geneigt und schieben Sie ihn über die Pumpe.

Drücken Sie die Auslaufblende an der Vorderseite nach unten und vergewissern Sie sich, dass sie ordnungsgemäß geschlossen ist (hinten und seitlich prüfen).

D 8. Bedienung

8. Bedienung

Wenn die Auslaufblende geschlossen ist, warten Sie 3 Sekunden, bis die rote LED nicht mehr leuchtet.

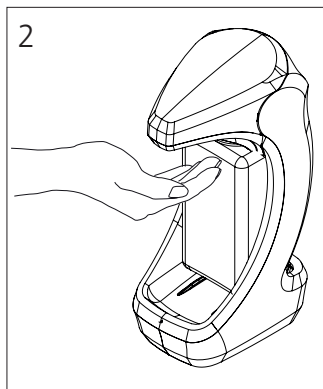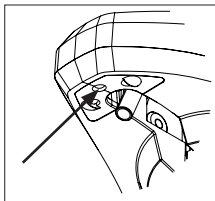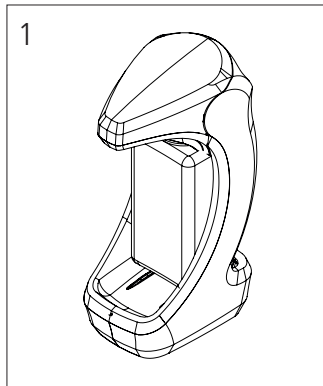

Um den Spendermechanismus zu aktivieren, halten Sie die Hand unter die Auslaufblende (in ca. 5 cm Abstand).

Dadurch gibt der Spender automatisch einen Sprühstoß ab. Wenn der Spender so eingestellt ist, dass er mehrere Sprühstöße abgibt (2 oder 3), erfolgen weitere Sprühstöße, solange die Hand nicht weggezogen wird.

Dosierung: 1,5 ml / Hub

D 9. Dosierung einstellen / 10. LED-Signale


9. Dosierung einstellen

Der Spender kann so eingestellt werden, dass er 1, 2 oder 3 Dosierungen abgibt. Wenn der Spender für die Abgabe mehrerer Dosierungen eingestellt ist, erfolgen weitere Hübe, solange die Hand nicht weggezogen wird. Wenn die Hand weggezogen wird, stoppt die Abgabe nach Abschluss des Hubs.

Standardmäßig ist der Spender auf die Abgabe von 1 Hub eingestellt.

Öffnen Sie die Auslaufblende und drücken Sie auf die Lasche (linke Seite), um die Zahl der Hübe zu erhöhen.


Wenn die Lasche korrekt gedrückt wurde, blinkt die LED gelb.

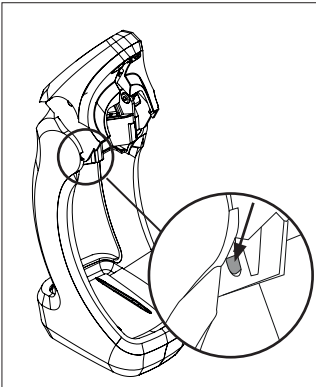

Drücke auf Lasche	LED-Signal	Zahl der Hübe
1 x drücken	2 x blinken	2 Hübe
2 x drücken	3 x blinken	3 Hübe
3 x drücken	1 x blinken	zurück zu 1 Hub

10. LED-Signale

Unterhalb der Auslaufblendes befindet sich eine LED, die grün, rot oder gelb leuchtet.

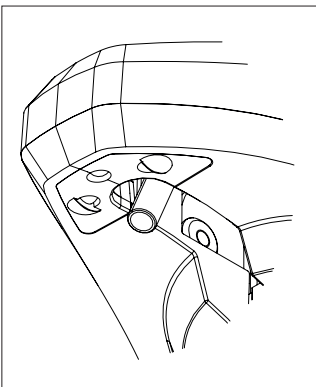

Farbe	Bedeutung
ROT (dauerhaft)	Auslaufblende offen / nicht ordnungsgemäß geschlossen
ROT (blinkend)	Batteriestand niedrig
GRÜN	Abgabe von Hüben
GELB	Einstellung der Zahl der Sprühstöße (LED blinkt entsprechend)

D 11. Instandhaltung / Pflege und Wartung

11. Instandhaltung / Pflege und Wartung

Auch ein qualitativ hochwertiges Produkt wie dieses Gerät benötigt Wartung und Pflege. Der Spender selbst ist mit Ausnahme des Batteriewechsels wartungsfrei.


Berücksichtigen Sie die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (www.rki.de).

Nutzen Sie zur Reinigung nur heißes Wasser und keine ätzenden oder abrasiven Reinigungsmittel.


Reinigung des Spenders:

Entfernen Sie die Abdeckung und entnehmen Sie die Batterien wie in Abschnitt 6.2 beschrieben. Reinigen Sie den Spender nur von außen. Wischen Sie den Spender mit einem feuchten Tuch ab.


 **Zerlegen Sie das Gerät in keinem Fall!**

 **Sofern der Behälter gefüllt ist, führt eine längere Nichtbenutzung zu keinen Beeinträchtigungen. Daher sollten Sie einen leeren Behälter rechtzeitig austauschen.**

 **Achten Sie darauf, das Gerät nicht unterzutauchen oder einem Wasserstrahl auszusetzen.**

 **Das Gerät ist nicht autoklavierbar und kann nicht in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden.**


Reinigung der Pumpe:

 **Die Pumpe selbst ist für die Geschirrspülmaschine geeignet (bis 60 °C). Nach der Reinigung in der Geschirrspülmaschine muss Sie für etwa 6 Stunden getrocknet werden, bevor sie wieder in das Gerät eingesetzt wird.**

 **Wenn das Saugventil trotzdem verstopft ist, pumpen Sie ausschließlich heißes Wasser hindurch, um die Funktion wiederherzustellen.**

D 12. Risiken und Störungen beheben

12. Risiken und Störungen beheben

 Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, entfernen Sie zunächst die Batterien bzw. trennen Sie es von der Stromversorgung.

Problem	mögliche Ursachen	Lösung
1. Das Gerät scheint normal zu funktionieren, es kommt aber nichts aus dem Auslauf.	<ul style="list-style-type: none"> Kein Behälter eingesetzt. Keine Pumpe eingesetzt. Gerät ist nicht geschlossen. Pumpe ist verstopft. Behälter ist leer. Pumpe ist nicht angepumpt oder hat Kontakt zum Medium verloren. Es wird ein ungeeignetes Medium verwendet. 	<ul style="list-style-type: none"> Vollen Behälter einsetzen. Pumpe in den Spender einsetzen Schließen Sie das Gerät. Pumpe entnehmen und reinigen. Behälter ersetzen. Mehrmals Dosiervorgang durchführen. Sollte dies nicht funktionieren, ist die Pumpe möglicherweise verstopft.. Anderes Medium verwenden. Pumpe vorher gründlich reinigen.
2. Das Gerät dosiert zu viel oder zu wenig Medium).	<ul style="list-style-type: none"> Dosierungseinstellung ist nicht richtig eingestellt. 	<ul style="list-style-type: none"> Dosierungseinstellung an der Pumpe vornehmen (siehe Abschnitt 9)
3. Das Gerät dosiert nicht	<ul style="list-style-type: none"> Die Batterien sind leer. Batterien falsch eingesetzt. 	<ul style="list-style-type: none"> Legen Sie neue Batterien ein. Achten Sie auf richtige Polarität.

D 13. Garantie / 14. Entsorgung

13. Garantie

2-jährige Herstellergarantie ab Lieferdatum.

14. Entsorgung

Führen Sie das Verpackungsmaterial dem Recycling zu.



Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf, sondern an einer Sammelstelle für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte abgegeben werden muss.

Weitere Informationen erhalten Sie bei den örtlichen Behörden, Entsorgungsunternehmen oder dem Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

14.1 Entsorgung der Batterien



Batterien dürfen nicht mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien abzugeben. Sie können Batterien an privaten oder öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Stadt oder Gemeinde oder überall, wo Batterien diesen Typs verkauft werden, abgeben.

D 15. Technische Daten

Gehäuse.....	ABS	Spannung.....	6 VDC
Behälter.....	Kunststoff, abnehmbar; 500 ml	Batterien.....	4 x LR 14
Pumpe.....	PP, PE & Silikon	Abmessungen in mm.....	B 102 x H 269 x T 142
Dosierung.....	1,5 ml / Hub	Gesamtgewicht.....	0,930 kg (mit Batterien, ohne Wandplatte)
		Gewicht.....	1,067 kg mit Wandplatte (optional)
		Konformität.....	RoHS-konform




Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

EMV-Richtlinie 2004/108/EG

EN 55014-1:2006

EN 55014-2:2001

EN 60335-1/A11:2014

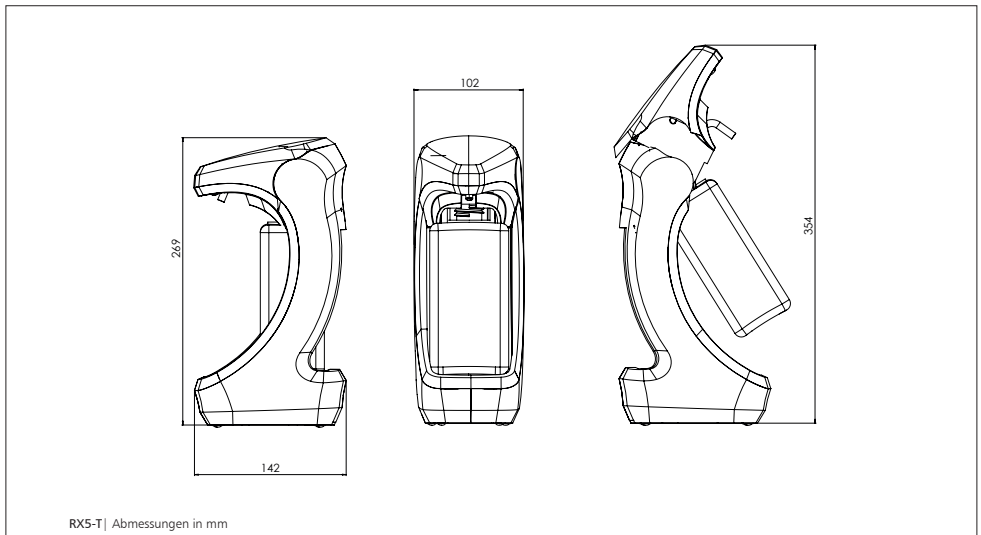

Technische Änderungen vorbehalten.

Vor Einsatz neuer Füllgüter sind Tests erforderlich!

1. Indications for the use of the service instructions

The following symbols are used in the instructions



Safety reference:

A non-observance may cause personal injury

NOTICE

Indicates a property damage message

2. Intended use





This appliance is suitable for hand disinfectant and soaps.

It is **not** intended for use with high-viscosity products or abrasive and aggressive agents.

The dispenser is for free standing, wallmount or pillar mount use. Use this appliance indoors only.

Use the appliance for hand disinfection and cleaning, under normal use cycles.

Ambient conditions:

-  • Never use the appliance in potentially explosive areas.
-  • Only use the appliance in a dustless environment.
-  • Pay attention to that the apparatus is only used at a relative air moisture of <90% (not condensing).
-  • Only use this apparatus at room temperature 15 -30 °C

EN 3. Safety information

3. Safety information



Attention!

Please read through carefully these operating instructions prior to initial operation and keep it.

OPHARDT hygiene does not assume any liability for damages in the case of:

- defects at the appliance caused by mechanical influences
- changings at the appliance without express approval of **OPHARDT hygiene**
- use for other purposes than that mentioned in the application


3.1 General safety

- ⚠ • Repairs at the appliance may exclusively be carried out by **OPHARDT hygiene** employees or persons authorized by **OPHARDT hygiene** Important dangers may occur by unexpert repairs. In case of a necessary repair please contact the manufacturer.
- ⚠ • Suspend the appliance on a dry and splash-proof place.
- ⚠ • This appliance is not a toy. Keep and use it out of the reach of children. The appliance should be installed where children cannot reach it.
- ⚠ • Persons with physical, sensory or mental impairment incl. children should be supervised when using this appliance.
- ⚠ • The appliance is not suitable for the transportation of media.
- ⚠ • Do not place the device directly in trafficked routes.
- ⚠ • The appliance is not suitable for the metering of other than the indicated media.
- ⚠ • Exclusively operate the appliance with leakproof alcalic batteries of the same manufacturer and type and with the same charging condition. Only use batteries with the indicated size type C.
- ⚠ • Do not operate the appliance with rechargeable batteries (accumulators).
- ⚠ • Do not use the dispenser if batteries have leaked in the appliance.
- ⚠ • Never use force.
- ⚠ • Take the batteries from the appliance prior to cleaning and attendance.
- ⚠ • The appliance need not be disassembled, no repairable parts.
- ⚠ • The face shield is not removable.
- ⚠ • The battery supply clamps may not be short-circuited with each other.
- ⚠ • Cleaning and user maintenance tasks must not be carried out by unsupervised children.

3.2 Safety during operation of the appliance

- ⚠️ • Protect your appliance against humidity.
- ⚠️ • Do not expose the appliance to thermal radiation and heat.
- ⚠️ • Never submerge the appliance in the water.
- ⚠️ • Only fill the appliance with the indicated substances in accordance with the intended use.
- ⚠️ • There are no dismantlable parts with the exception of pump, receptacle, battery cover, batteries
- ⚠️ • The appliance is not autoclavable and cannot be cleaned in the dishwasher.
- ⚠️ • The apparatus shouldn't be cleaned with water jets or by means of a high-pressure cleaner.
- ⚠️ • Please make sure that the medium does not reach the ground.

4. Technical drawing

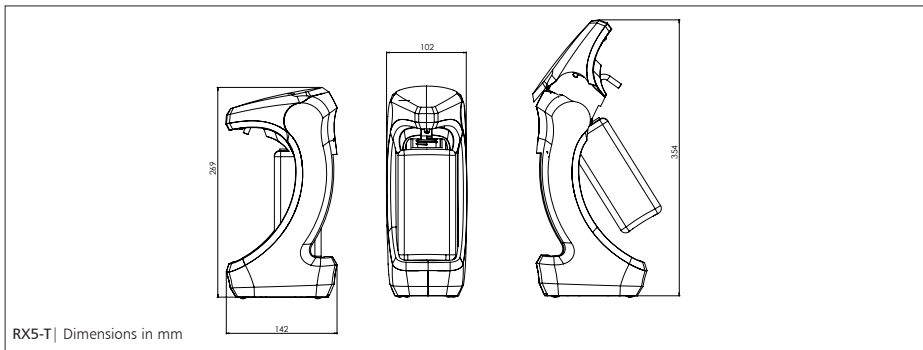

5. Scope of delivery

- Dispenser
- Plastic pump
- Receptacle, 500 ml
- Batteries (4 mono-cells, type LR 14)
- Instruction manual
- Optional: Wallmount (including ingo-man® standard backplate and fixing set)

EN 6. Mounting of the dispenser


6. Mounting the dispenser

6.1 Wall mounting

The dispenser has the option of being free standing or wall mounted.

If free standing please ensure that:


- The surface is level and secure
- It is clear of any passing or moving objects
- If the dispenser is knocked any spillage should not effect near by equipment

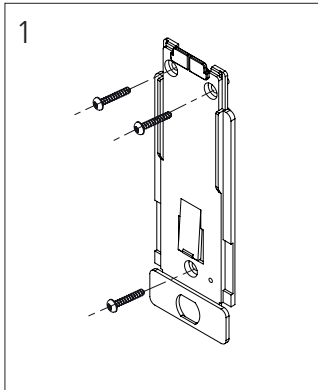

If the dispenser is to be mounted on a wall please follow the instructions listed below:

NOTICE


- The dispenser must be mounted to the fixing apertures provided on a non-sloping wall using at least 3 screws.
- Mount the appliance on the wall using the enclosed fixings or other suitable fixings.
- Check the suitability of the wall before mounting!
- When choosing where to mount the appliance, please consider ease of access for filling!
- Do not install the appliance in narrow entrances and passage-ways!
- Microwaves or fluorescent tubes can cause electromagnetic interference. If this is the case, please remove the source of the interference. This will restore the device to problem-free operation.

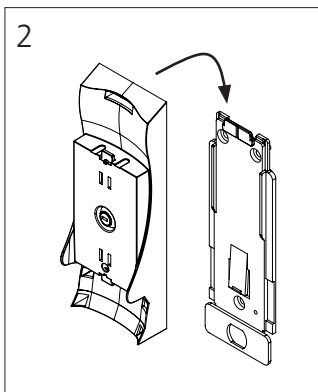


Fix the ingo-man backplate to the wall using the rawl plugs & screws provided (fig. 1).

Push the wall mount to the wall and slide down over ingo-man backplate until the spring tongue is engaged (fig. 2).


EN 6. Mounting of the dispenser

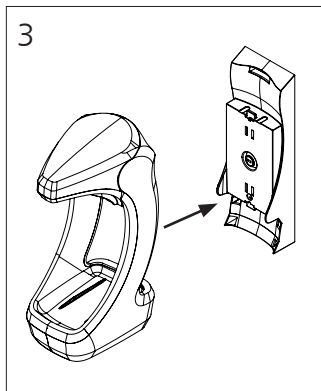

Place the dispenser on the wallmount, lining up the bottle opening with the rectangular boss on the wallmount (fig. 3).

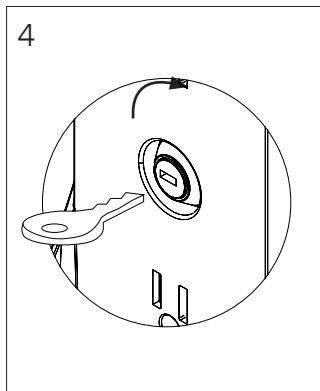


Turn the key to lock the dispenser in place. Remove the key before inserting the bottle (fig. 4).

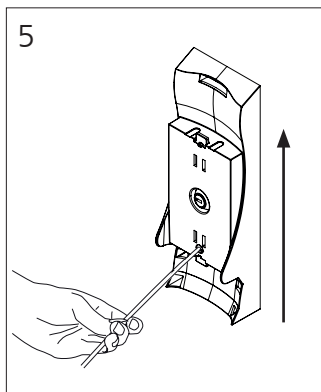

To remove the wallmount from the ingo-man backplate, using a thin tool push on the tongue of the backplate (through the hole provided) and slide the wallmount upwards (fig. 5).

EN 7. Going into operation

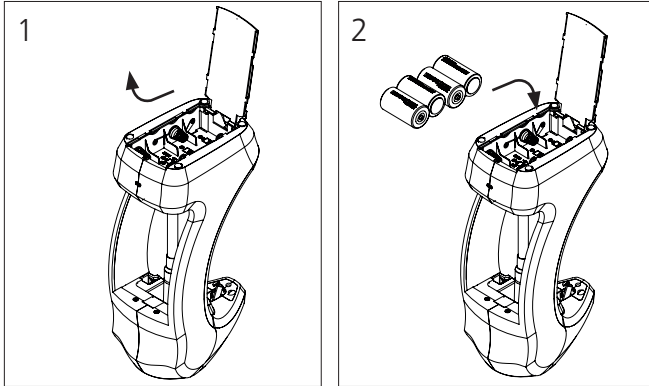

7. Going into operation

7.1 Insert/Replacing of the batteries


To open battery cover slide the cover towards the back of the dispenser and then rotate cover upwards to expose the battery compartment (fig. 1).

Insert batteries as per marked on the battery compartment (fig 2).

Pay attention to the polarity.

Place the ribbon below the batteries before inserting to aid removal.

NOTICE Batteries should be removed if it is not used for longer periods.


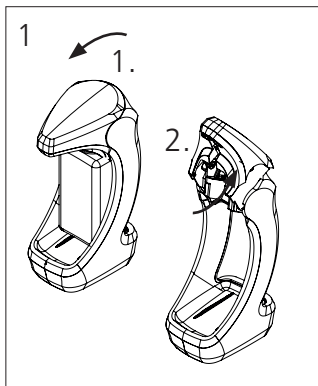


7.2 Inserting the pump & bottle



Open the faceshield by pulling forward (1.) and rotating it upwards and towards the rear of the dispenser (2.) (fig. 1).

NOTICE Remove the filling media before transport!

EN 7. Going into operation

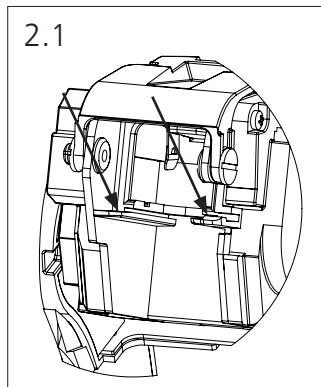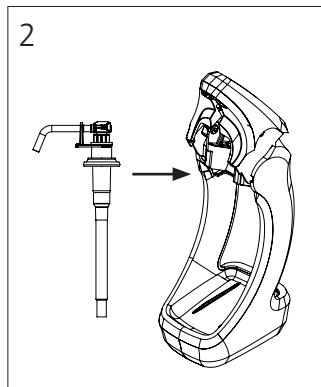

Slide the pump into the chassis guides and past the lock tab as shown (fig. 2 and fig. 2.1)


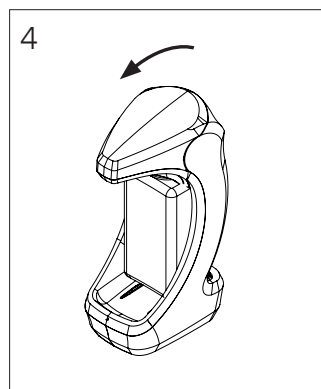
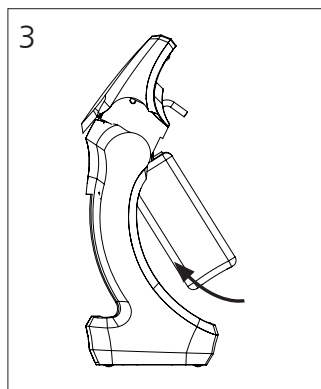


With the bottle an angle slide the bottle up onto the pump
Push down on the front of the faceshield ensuring that it has closed correctly (see that back and sides match)

EN 8. Basic operation

8. Basic operation

Once the faceshield is closed wait 3 seconds for red LED to go off.

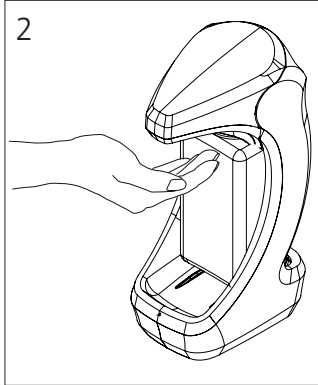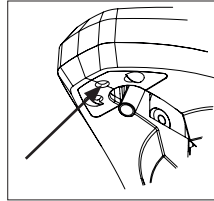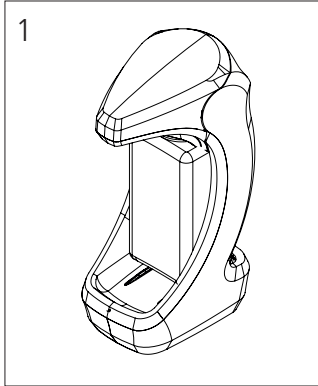

To activate the dispenser place the hand underneath the faceshield (approx. 5cm).

This will trigger an automatic dispense. If the unit is set for multiple strokes (2 or 3) it will continue as long as the hand is present .

Dosage: 1,5 ml/ Stroke

EN 9. Changing stroke / 10. LED Function


9. Changing stroke

The dispenser can be set to dispense a single, double or triple dosage. If set for multiple dosage the dispenser will only operate as long as a hand is present. If the hand is removed it will complete the current activation and stop the dispenser.

The dispenser is supplied set to single stroke as standard.

With the faceshield open press the tab (left hand side) to increase the stroke


The LED will flash amber when the tab is pressed correctly.

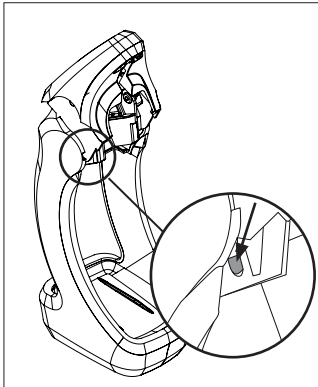

Pressing the tab	Amber flash	Stroke
1st time	2 flashes	2 stroke
2nd time	3 flashes	3 stroke
3rd time	1 flash	Returns to 1 stroke

10. LED Function

Underneath the faceshield there is an LED which lights green, red and amber.

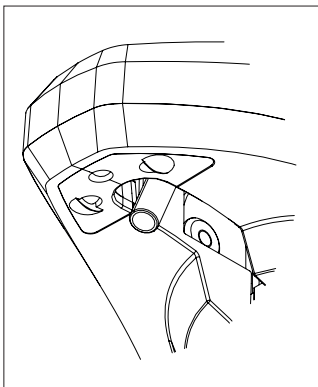

Colour	Explanation
RED (solid)	Faceshield open/not closed correctly
RED (Flashing)	Batteries low
Green	Unit dispensing
Amber	Stroke selection (based on number of flashes)

EN 11. Maintenance / attendance and maintenance

11. Maintenance / attendance and maintenance

Please consider that also a high-quality product like this appliance requires attendance and care. The dispenser itself is maintenance-free with the exception of the battery exchange!

Please follow the recommendations of the Robert Koch-Institute (www.rki.de)

Please only use hot water and do not use caustic purifiers or scouring powders!

Cleaning dispenser:

Remove the mounting plate and dismount the batteries as it is described under 7.

Cleaning of the dispenser only from the outside. Wipe the dispenser with a humid cloth.

 • **By no means disassemble the appliance!**

 • **If the receptacle is filled up, a non-use during a longer period of time does not lead to an impairment. For that reason exchange the empty receptacle in time.**

 • **Please pay attention that the appliance is not submerged or exposed to water jets.**

 • **The appliance is not autoclavable and cannot be cleaned in the dishwasher.**


Cleaning pump:

 • **The pump itself is dishwasher-proof (60°C), however it must rest for about 6 hours after such a treatment before it is inserted again into the appliance.**

 • **If the suction valve is nevertheless clogged, please only pump hot water through it in order to restore the function.**

EN 12. Eliminate trouble

12. Eliminate trouble

 If the appliance malfunctions, please remove batteries or unplug it from the mains.

Characteristic	Possible cause	Solution
<p>1. The appliance seems to function normally but no medium penetrates.</p>	<ul style="list-style-type: none"> No receptacle is inserted. No pump is installed. Appliance is not closed Pump is clogged. Receptacle is empty. Pump is not primes for operation or lost contact to the medium. An unsuitable medium has been used. 	<ul style="list-style-type: none"> Insert full receptacle. Insert pump into the dispenser. Close the appliance Remove pump and clean it. Replace receptacle. Carry out the dosage process several times. If it doesn't function, the pump is possibly clogged. Use another medium. Clean the pump thoroughly before.
<p>2. The appliance doses too much or not enough medium</p>	<ul style="list-style-type: none"> Stroke adjustment is not adjusted correctly. 	<ul style="list-style-type: none"> Adjust the number of strokes. See section 9.
<p>3. The appliance doesn' t dose</p>	<ul style="list-style-type: none"> Batteries are empty Batteries have not been inserted correctly. 	<ul style="list-style-type: none"> Insert new batteries. Pay attention to the polarity

13. Warranty

2 years manufacturer-warranty from the date of delivery.

14. Disposal

Dispose of the packing material into the corresponding recycling plants.



The symbol on the product or its packaging indicates that this product should not be treated as standard household waste, but should be taken to a recycling point for electrical and electronic devices.

Further information may be obtained from your municipality, the municipal disposal companies or the company from where you purchased the product.

14.1 Battery disposal



Batteries should not be disposed of as household waste. As a consumer, you are statutorily obliged to return used batteries. You can dispose of old batteries at domestic collection points, public collection points in your municipality or at any location where batteries of this type are sold.

EN 15. Technical data

15. Technical data

Housing.....ABS

Receptacle.....synthetic material,
removable 500 ml

Pump.....PP, PE & Silcon

Dosage.....1,5 ml/stroke

Voltage.....6 volt DC

Batteries.....4 x LR 14

Dimensions in mm.....B 102 x H 269 x T 142

Total weight.....0,930 kg
(with batteries, without backplate)

Weight.....1,067 kg
optional with backplate

Conformity.....RoHS compliant


CE Machinery directive 2006 / 42 / EG

EMC- directive 2004 / 108 / EG

EN 55014-1:2006

EN 55014-2:2001

EN 60335-1/A11:2014

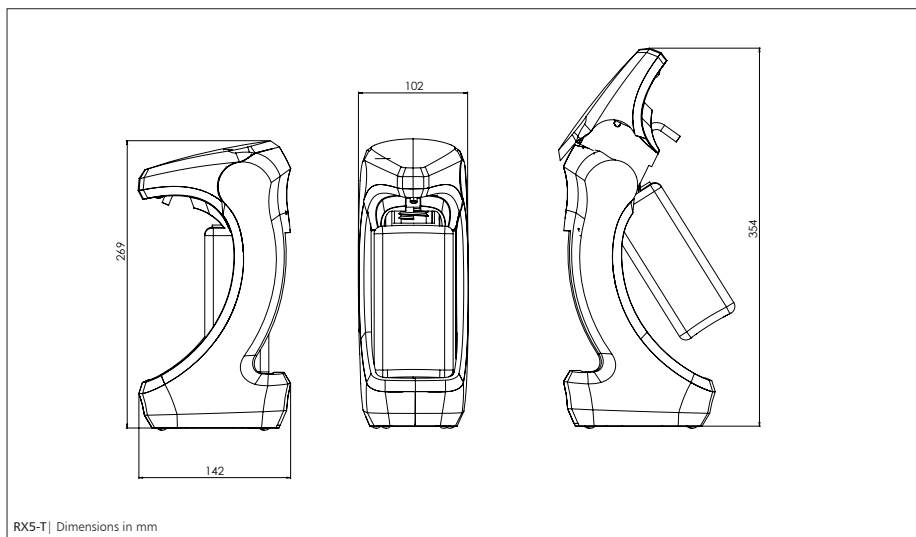

Technical modifications reserved.
Prior to the use of new filling media tests are required!

OPHARDT
hygiene

OPHARDT Hygiene-Technik GmbH & Co. KG
Lindenau 27 | 47661 Issum | Deutschland
Tel.: +49 2835 18-10 | Fax: +49 2835 18-77
www.ophardt.com | E-Mail: customer care@ophardt.com